



輔具小學堂



衛教影片

氧氣鋼瓶

可以在過濾空氣後，將富含氧氣的空氣提供給個案，改善氧氣不足及減輕心肺負荷，適合短時間使用。

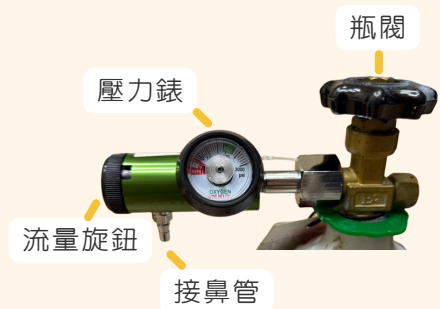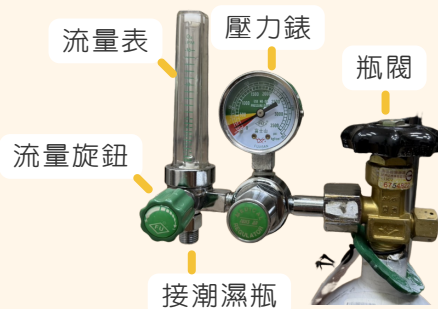

－ 使用方式

1. 視流量表形式接上鼻管或先接潮濕瓶（加入適量的蒸餾水）再接鼻管
2. 將瓶閥（氧氣瓶上方的黑色旋鈕）打開，確認壓力錶指針顯示瓶內是否有氧氣
3. 旋轉流量調節鈕至醫師建議流量
4. 確認鼻導管有氧氣流出後即可讓個案使用
5. 使用完後先將瓶閥關緊，待壓力錶指針歸零後，再將氧氣流量調節鈕歸零

★氧氣瓶可供氣時間，視所調流量大小而定★

★改變氧氣流量或停止氧氣治療前，建議先與醫生聯繫★