

輔具小學堂



衛教影片

爬梯機

協助因行動不便而無法自行或困難執行上下樓梯者，透過爬梯機之功能來解決上下樓梯之困擾。



爬梯機操作版面介紹

1. 平地輪開關-按上:收平地輪；按下:放平地輪
2. 電量顯示燈-綠燈:正常使用；橘燈:電量較低；紅燈:電量低不要使用
3. 緊急停止按鈕-下壓:切斷電源；打開:向右轉恢復電源
4. 履帶動力開關-按上:上樓梯；按下:下樓梯
5. 雷射按鈕-按下沉入:打開雷射光；在按彈出:關閉雷射光
6. 動力警示燈:履帶有電源動力，則燈亮

搭載人員介紹



1. 人上機時需先將**防傾支架**放下
2. **平地輪**會緩慢收起，避免機台移動




1. 將腳、腰、胸安全帶固定
2. 調整頭整位置

輔具小學堂

爬梯機-上樓梯

清楚了解上樓梯操作方式。

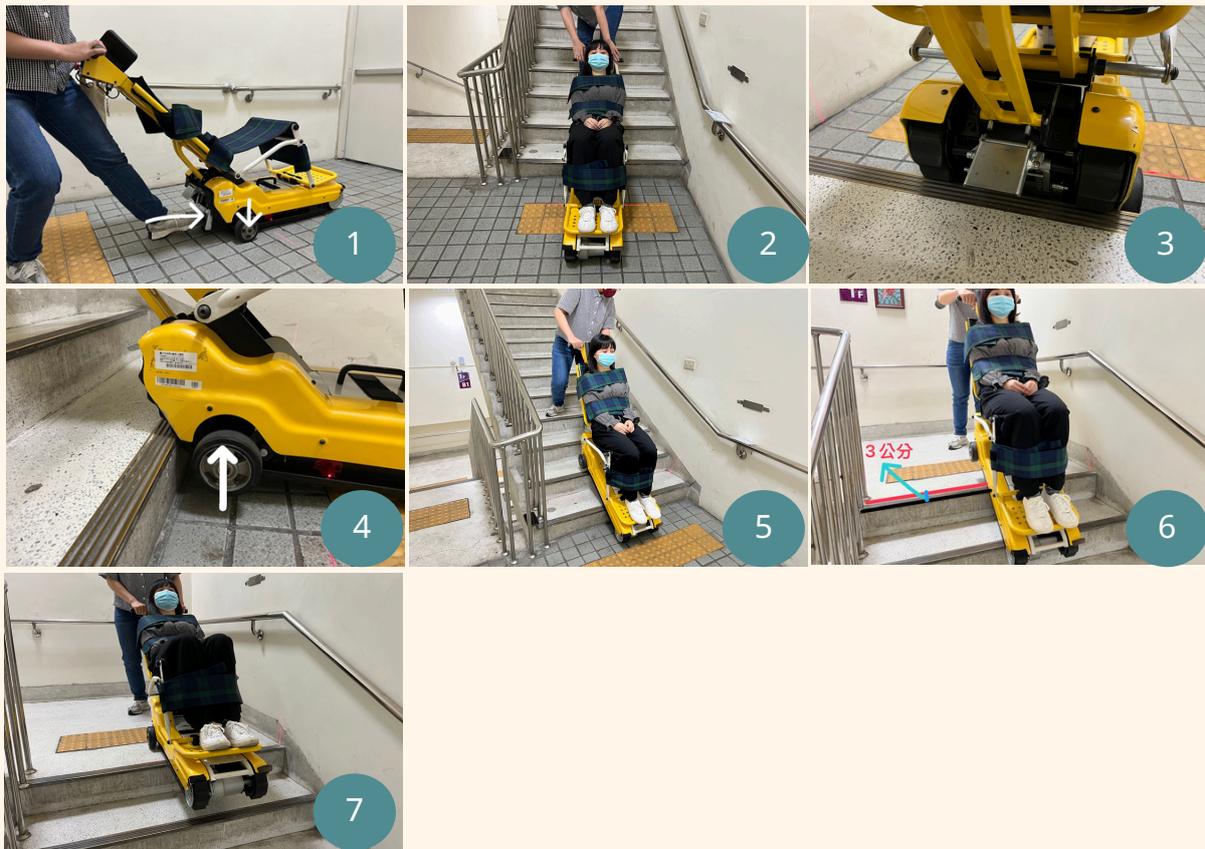

1. 持續按平地輪開關下方-使平地輪放下後，將防傾支架收起
2. 將爬梯機移動到樓梯中間處
3. 須注意將兩側履帶緊靠階梯
4. 持續按履帶動力開關上方-使爬梯機上樓梯前須等待平地輪收起
5. 爬梯機上樓梯時須持續按住履帶動力開關上方
6. 當雷射指示超過稜角約3公分內，需放開履帶動力開關，停住車身
7. 將車身緩慢向後傾，等待平地輪放下後，再往下一台階繼續上樓梯

輔具小學堂

爬梯機-下樓梯

清楚了解下樓梯操作方式。



- 1.此時平地輪放下狀態，可推行
- 2.將爬梯機移動到樓梯中間處，兩側雷射指示超過稜角約3公分內
- 3.將車身緩慢向前傾斜，此時平地輪自動升起，按履帶動力開關下方，開始下樓
- 4.爬梯機達平面後放開履帶動力開關，此時平地輪自動放下即可推行
- 5.達下車處，放下防傾支架，平地輪會自動收起